



QUICKIE QS7 X

Een ultralichte, configureerbare vouwrolstoel die compact meegaat en precies op uw houding en rijstijl kan worden afgestemd.

In het kort

licht vouwen, stabiel rijden

Ultralicht vouwframe

De QS7 X is het lichtste opvouwbare aluminium frame van QUICKIE. Het transportgewicht begint bij 6,7 kg. Tillen, opvouwen en meenemen vragen daardoor minder kracht.

Afgestemd op u

De serie biedt vier frametypes, meerdere framehoeken en drie mogelijkheden voor het voorframe. De instelling van rug, zwaartepunt en voorwielen kan op uw lichaam en beweging worden afgestemd.

Compact onderweg

FreeFold™ helpt de rolstoel soepel op te vouwen. Fold-N-Lock houdt het frame daarna veilig gesloten.

Belangrijkste gegevens

Transportgewicht	vanaf 6,7 kg
Zitbreedte	320–500 mm
Max. gebruikersgewicht	110–140 kg, modelafhankelijk
Frametypes	4
Framekleuren	22

Maten, gewichten en uitzonderingen staan op pagina 8 en 9.



Vervoeren

soepel vouwen en compact meenemen



FreeFold™

De positie van de achterwielen helpt de QS7 X tijdens het opvouwen stabiel en rechtop te blijven staan. Zo houdt u meer controle bij het hanteren en vervoeren.



Fold-N-Lock

Met één klik blijft de rolstoel compact gesloten. U hoeft het frame niet zelf dicht te houden tijdens het tillen, vervoeren of opbergen.

FrontFold-optie

Het volledig opvouwbaar voorframe maakt het pakket slechts 58 cm lang, 27 cm breed en 43 cm hoog. FrontFold is uitsluitend beschikbaar voor de QS7 X en QS7 X PRO. Een QS7 X met FrontFold is niet crashtest-gekeurd.

Rijgevoel

direct en efficiënt door een stijf frame

Aluminium uit de 7020-serie

Dit aluminium maakt dunnere en lichtere framebuizen mogelijk zonder de duurzaamheid uit het oog te verliezen.

56% meer framestijfheid

Het vernieuwde kruisframe, de asplaat en het balhoofd verhogen de framestijfheid met 56% ten opzichte van eerdere vergelijkbare QUICKIE-modellen. Daardoor gaat minder energie verloren tijdens het rijden.

ShapeLoc Technologie

De ovale framebuizen verdelen krachten en beperken doorbuiging. Ze helpen ook voorkomen dat bevestigingsklemmen, bijvoorbeeld voor elektrische rolstoelaandrijvingen, verdraaien.

Nauwkeurig balhoofd

Hoek, uitlijning en hoogte zijn drievoudig instelbaar. De voorwielen worden bij iedere configuratie afgestemd op framehoek en frame-instelling.



Vier frametypes

iedere uitvoering heeft een eigen doel

QS7 X

Lichtgewicht aluminium vouwframe met een open, minimalistisch ontwerp. Het open frame vergemakkelijkt transfers in en uit de auto.

QS7 X Hybrid

Versterkt frame voor maximale stabiliteit en een gebruikersgewicht tot 140 kg. Geschikt voor gebruik met elektrische rolstoelaandrijvingen. Sterk aflopende framebuizen ondersteunen zelfstandige transfers.

QS7 X PRO

Vastgelast zwaartepunt en optioneel een vastgelaste rughoek. Dat beperkt het aantal losse onderdelen, bespaart 300 gram en verhoogt de framestijfheid.


QS7 X SA

Wegzwenkbare, afneembare beensteunen helpen bij transfers en maken de rolstoel compacter voor vervoer en opslag.



Slimme opties

praktische details voor dagelijks gebruik

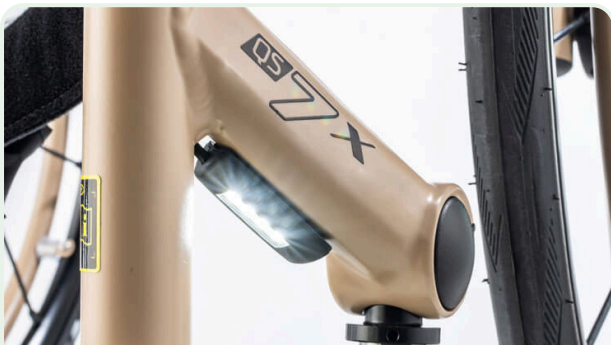

Geïntegreerde ledverlichting

Drie standen: fel, gedimd en knipperend.
Afneembaar om op te laden.



Compacte Omobic schaarremmen

Ergonomisch, licht te bedienen en voorzien
van een geribbeld oppervlak voor grip.



Transportbescherming

Optionele bescherming van asadapters en de
onderkant van de rugbuizen.



Aluminium voetplaat

Doorlopend of gedeeld, met instelbare hoek,
breedte en diepte.

Verder mogelijk: carbon zijanten met spatbord, een titanium quick-release-as die 90 gram lichter is dan de standaarduitvoering, en verschillende JAY-zitkussens en rugleuningen. De JAY J3-rugleuning is ook in de framekleur verkrijgbaar.

Uw uitvoering

persoonlijke keuzes in uiterlijk en ondersteuning



Modern ontwerp

- ✓ 22 kleuren voor frame en hoepels
- ✓ Rugbekleding met verschillende accentkleuren
- ✓ Voorvorken geanodiseerd of gepoedercoat
- ✓ Wielen geanodiseerd of gepoedercoat
- ✓ Framemotief voor een eigen uitstraling

3D Visualizer en Built-4-Me

Met de QS7 X Visualizer ziet u hoe uw keuzes het uiterlijk en gewicht beïnvloeden. Voor bijzondere wensen kan het Built-4-Me-team van QUICKIE een individuele uitvoering onderzoeken.

Elektrische ondersteuning

De QS7 X kan worden gecombineerd met elektrische rolstoelaandrijvingen. De geschiktheid en montage hangen af van de gekozen configuratie.

Maten

gedeelde gegevens en modelverschillen

1. GEDEELD DOOR ALLE VIER MODELLEN

Zitbreedte	320–500 mm
Zitdiepte	340–500 mm
Zithoogte achter	370–500 mm
Zithoek	0–110 mm
Rughoogte	250–475 mm
Onderbeenlengte	220–500 mm
Totale breedte	zitbreedte + 160 mm
Totale lengte	1150 mm
Totale hoogte	1050 mm
Achterwiel	24" of 25"

2. VERSCHILLEN PER MODEL

Zithoogte voor	QS7 X / Hybrid / PRO: 400–560 mm; SA: 430–570 mm
Rughoekinstelling	QS7 X / Hybrid / SA: –15° tot +13°; PRO: –15° tot +13° of vastgelast
Framehoek	QS7 X / Hybrid / PRO: 80°, 88° of 92°; SA: 70°, 80° of 90°
Frame-inset	QS7 X / Hybrid / PRO: 0 of 10 mm per zijde; SA: niet van toepassing
Voorwiel	QS7 X / Hybrid / PRO: 3", 4", 5" of 6"; SA: ook 7"

De exacte uitvoering wordt afgestemd op de gebruiker. Technische wijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Modelgegevens

gewicht en belasting per frametype

QS7 X

Transportgewicht vanaf	6,7 kg
Rolstoelgewicht vanaf	9,3 kg
Max. gebruikersgewicht	110 kg
Crashtest	Ja

QS7 X HYBRID

Transportgewicht vanaf	7,2 kg
Rolstoelgewicht vanaf	9,8 kg
Max. gebruikersgewicht	140 kg
Crashtest	Ja, tot 136 kg

QS7 X PRO

Transportgewicht vanaf	6,3 kg
Rolstoelgewicht vanaf	8,9 kg
Max. gebruikersgewicht	110 kg
Crashtest	Ja

QS7 X SA

Transportgewicht vanaf	7,2 kg
Rolstoelgewicht vanaf	10,4 kg
Max. gebruikersgewicht	125 kg
Crashtest	Ja

Succesvol crashtest volgens ISO 7176-19 met een 4-punts vastzetsysteem. De QS7 X met FrontFold-optie is niet crashtest-gekeurd.

Pasadvies

persoonlijk advies en service in Ede



Maak een pasafspraak

Een actieve rolstoel vraagt om nauwkeurig passen en afstellen. Tijdens een afspraak bekijken we uw zithouding, transfers, rijstijl en de manier waarop u de rolstoel wilt meenemen.

Vergelijk de uitvoeringen

We bespreken welke verschillen tussen Open, Hybrid en PRO voor u relevant zijn. Daarbij nemen we ook opties, elektrische ondersteuning en transport mee.

Eigen werkplaats

Ook na aanschaf kunt u bij Zorg Totaal terecht. In onze eigen werkplaats verzorgen we afstelling, onderhoud en reparatie.

Showroom in Ede

Plan uw afspraak via zorgtotaalwinkel.nl/showroom of bel **0318-241001**. Zo reserveren we voldoende tijd voor uw vragen en een passende proefrit.



Kom vrijblijvend proberen

Probeer de QUICKIE QS7 X rustig uit in onze showroom in Ede. Onze adviseurs denken met u mee. De koffie staat klaar.

Maak een afspraak via

zorgtotaalwinkel.nl/showroom

Adres

Zorg Totaal Winkel BV
Frankeneng 14, 6716 AA Ede
0318-241001 · info@zorgtotaalwinkel.nl

Openingstijden

Di t/m vr	10:00 tot 17:00 uur
Zaterdag	op afspraak
Zo en ma	gesloten

Productinformatie: Sunrise Medical, QUICKIE QS7 X brochure NL, BR-QUICKIE-QS7X-NL-NL-REV-A01, 26J0703 (2026). Zorg Totaal is officieel dealer van QUICKIE / Sunrise Medical. Afbeeldingen kunnen afwijken van het geleverde product. Wijzigingen en zetfouten voorbehouden. © Zorg Totaal Winkel BV